

Brief Instruction | Kurzanleitung

CORiTEC Systems

Set-up Network & CAM PC | Netzwerk & CAM PC-Einrichtung

Information Informationen	1
Introduction Einleitung	1
Copyright Urheberschutz	1
Trademark protection Markenschutz.....	1
Customer Service Kundenservice.....	2
Preparative steps Vorbereitende Schritte	2
Transport, installation and commissioning Transport, Aufstellung und Inbetriebnahme	2
Network set-up CAM PC Netzwerkeinrichtung CAM PC	3
Create network user Netzwerkbenutzer anlegen	3
Share CAM output folder in the network CAM Ausgabeordner im Netzwerk freigeben	8

Network set-up CORiTEC system Netzwerkeinrichtung CORiTEC System.....	12
CORiTEC system with SmartControl V2.0 CORiTEC System mit SmartControl V2.0	12
CORiTEC system with SmartControl V1.0 or REMOTE CORiTEC System mit SmartControl V1.0 oder REMOTE.....	22

Information | Informationen

Introduction | Einleitung

The contents of this Brief instruction are intended exclusively for trading partners of imes-icore GmbH. A spreading of the guidance to third is forbidden!

Die Inhalte dieser Kurzanleitung richten sich ausschließlich an Handelspartner der imes-icore GmbH. Ein Weitergeben der Anleitung an Dritte ist ausdrücklich untersagt!

Copyright | Urheberschutz

The contents of this Brief instruction are copyright protected and are the intellectual property of imes-icore GmbH. Usage of this content is only permissible of using the machine. Any use outside of this is prohibited without the express written permission of the manufacturer. All rights, also those of translation, are reserved.

Die Inhalte dieser Kurzanleitung sind urheberrechtlich geschützt und geistiges Eigentum der imes-icore GmbH. Die Verwendung der Inhalte ist im Rahmen der Nutzung der Maschine zulässig. Eine darüberhinausgehende Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.

Trademark protection | Markenschutz

All rights to product, company and brand names or third-party rights in this operating manual belong to the respective company or holder, regardless of their form, and are subject to international copyright and trademark laws. Individual labelling has been omitted from this Brief instruction. imes-icore® is a legally protected trademark according to section 4 no.1 MarkenG (trademark law).

Alle Rechte an Produktnamen, Unternehmensnamen, Markennamen oder von Drittparteien unabhängig der Formatierung in dieser Gebrauchsanleitung sind Eigentum des jeweiligen Unternehmens oder Inhabers und unterliegen einem internationalen urheber- und markenrechtlichen Schutz. In dieser Kurzanleitung wird auf eine individuelle Kennzeichnung verzichtet. imes-icore® ist eine nach § 4 Nr.1 MarkenG (Markengesetz) eingetragene und rechtlich geschützte Marke.

Customer Service | Kundenservice



imes-icore GmbH | Im Leibolzgraben 16 | D-36132 Eiterfeld



+49 (0) 6672 898-469



+49 (0) 6672 898-223



support@imes-icore.de



www.imes-icore.de



Preparative steps | Vorbereitende Schritte

Transport, installation and commissioning | Transport, Aufstellung und Inbetriebnahme


Transport, installation and commissioning of the machine according to the operating manual! Observe the warning and safety instructions in the operating manual!

[Transport, Aufstellung und Inbetriebnahme der Maschine nach Betriebsanleitung! Warn- und Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung beachten!](#)

Network set-up CAM PC | Netzwerkeinrichtung CAM PC

Create network user | Netzwerkbenutzer anlegen


1.

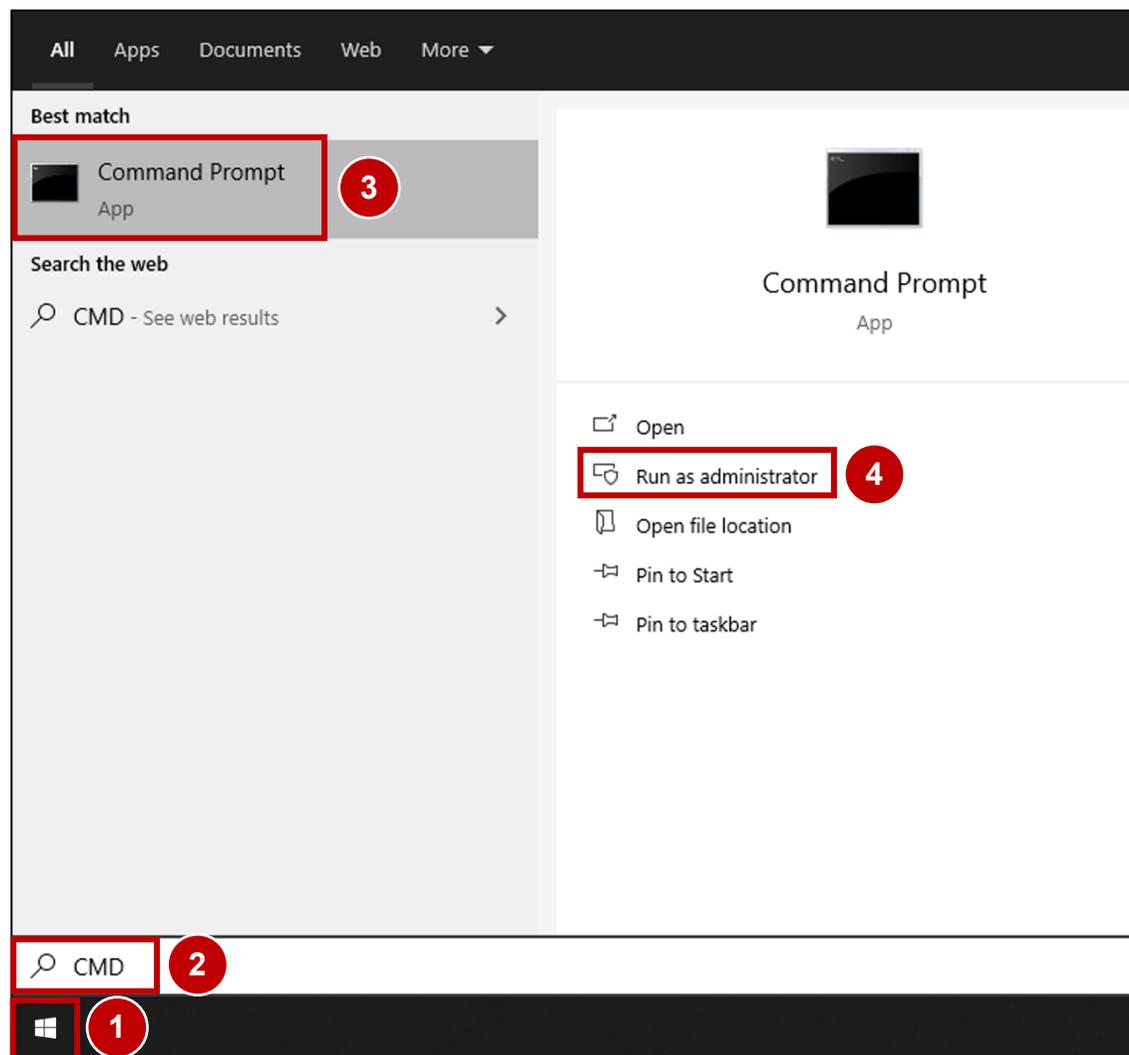

1. Switch on the CAM PC at the main switch.
2. Wait until the CAM PC has completely booted.
3. Press the Windows® Start button (1).
4. Type **cmd** (2) to search the Command Prompt App (3).
5. Press Run as administrator (4).

-
1. CAM PC am Hauptschalter einschalten.
 2. Warten bis der CAM PC vollständig gebootet hat.
 3. Windows®-Start-Taste (1) betätigen.
 4. Zum Suchen der Eingabeaufforderungs-App (3) **cmd** (2) eintippen.
 5. Als Administrator ausführen (4) betätigen.

2.

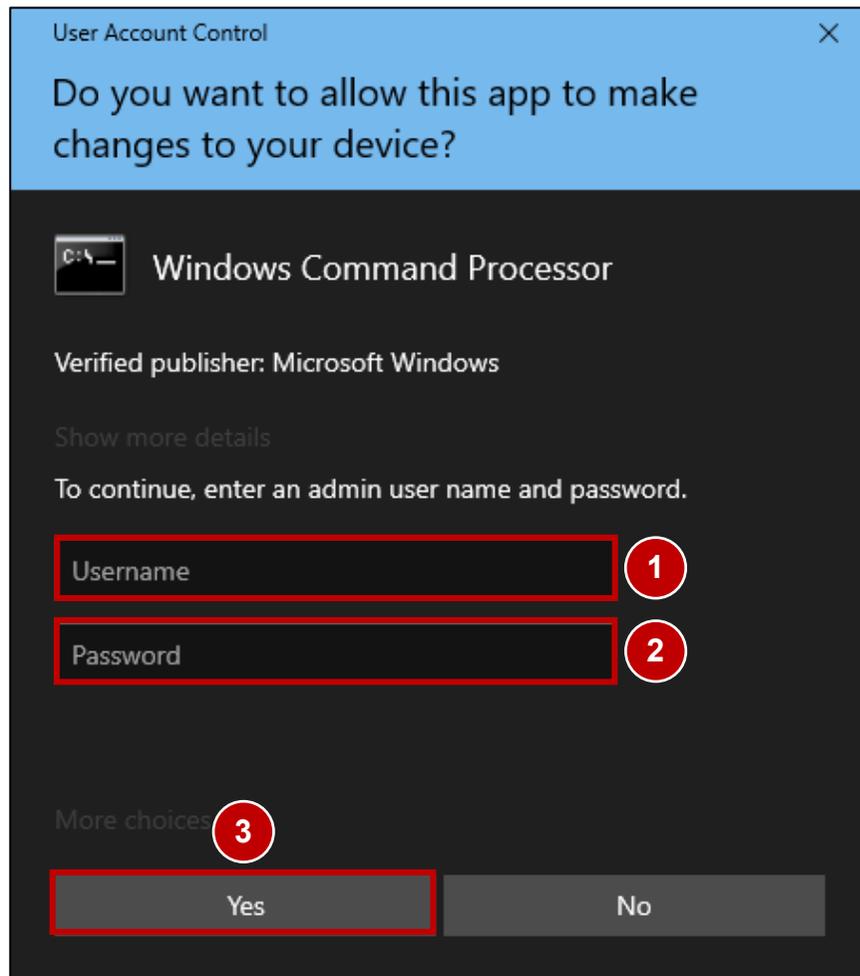

1. Type in the user name with admin rights (1).
2. Type in the Password (2) for the user.
3. Press Yes (3).

Note: For customised CAM-PCs which are not delivered by imes-icore, the corresponding user name and password must be requested from the customer!

1. [Benutzername mit Adminrechten \(1\) eingeben.](#)
2. [Kennwort \(2\) für den Benutzer eingeben.](#)
3. [Ja \(3\) betätigen.](#)

Hinweis: Bei kundenspezifischen CAM-PCs die nicht von der imes-icore geliefert wurden, muss der entsprechende Benutzername und das Kennwort beim Kunden angefordert werden!

3.

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.685]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\WINDOWS\system32> net user "icam" "imeS200-" /add
```

Creating a user name and password.
Benutzernamen und Kennwort anlegen.

1. Type in **net user "icam" "imeS200-" /add** (1) and press the Enter key.

1. **net user "icam" "imeS200-" /add** (1) eingeben und die Enter-Taste betätigen.

4.

```

Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.685]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>net user "icam" "imeS200-" /add
The command completed successfully. 1

C:\WINDOWS\system32>exit 2

```

1. If the Text (1) – The command completed successfully – appears the network user was created successfully!
Note: If the Text – The user already exists – appears skip to next Page!
2. Type in **exit** (2) and press the Enter key.

-
1. Wenn der Text (1) – Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt – erscheint, wurde der Netzwerkbenutzer erfolgreich angelegt!
Hinweis: Wenn der Text - Das Konto existiert bereits – erscheint, mit der nächsten Seite fortfahren!
 2. **Exit** (2) eingeben und die Enter-Taste betätigen.

5.

```

Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.685]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>net user "icam" "imesS200-" /add
The account already exists.

More help is available by typing NET HELPMSG 2224.

C:\WINDOWS\system32>exit


```

1. If the Text (1) – The user already exists – appears the network user already was created once before!
2. Type in **exit** (2) and press the Enter key.
3. Check if the User name (icam) and password (imesS200-) are working otherwise you have to remove the User icam manually!
(Contact your Network Administrator or the imes-icore customer service!)
4. After removing the User icam repeat the process *Create network user | Netzwerkbenutzer anlegen!*

-
1. Wenn der Text (1) – Das Konto existiert bereits – erscheint, wurde der Netzwerkbenutzer schon zuvor angelegt!
 2. **Exit** (2) eingeben und die Enter-Taste betätigen.
 3. Prüfen, ob der Benutzername (icam) und das Passwort (imesS200-) funktionieren, andernfalls muss der Benutzer icam manuell entfernt werden!
(Netzwerkadministrator oder imes-icore Kundenservice kontaktieren!)
 4. Nach dem Entfernen des Benutzers icam muss der Vorgang *Create network user | Netzwerkbenutzer anlegen* wiederholt werden!

Share CAM output folder in the network | CAM Ausgabeordner im Netzwerk freigeben


1.

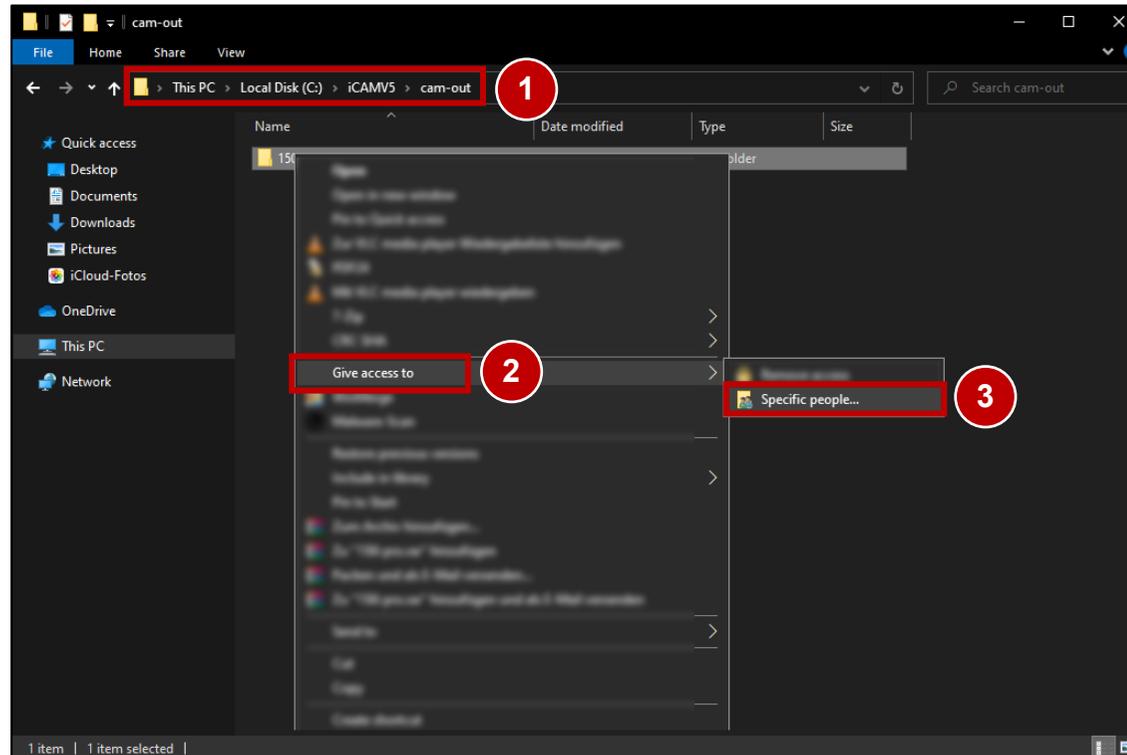

1. Open a new Windows® Explorer window. (Windows® button + E)
2. Navigate (2) to the CAM output folder.
3. Right-click on the folder to be shared in the network.
4. Open Give access to (2).
5. Press Specific people (3).

1. Neues Windows®-Explorer-Fenster öffnen. (Windows®-Taste + E)
2. Zum CAM-Ausgabeordner Ordner navigieren (2).
3. Rechtsklick auf den Ordner der im Netzwerk freigegeben werden soll.
4. Zugriff gewähren auf (2) öffnen.
5. Bestimmte Person (3) betätigen!


2.

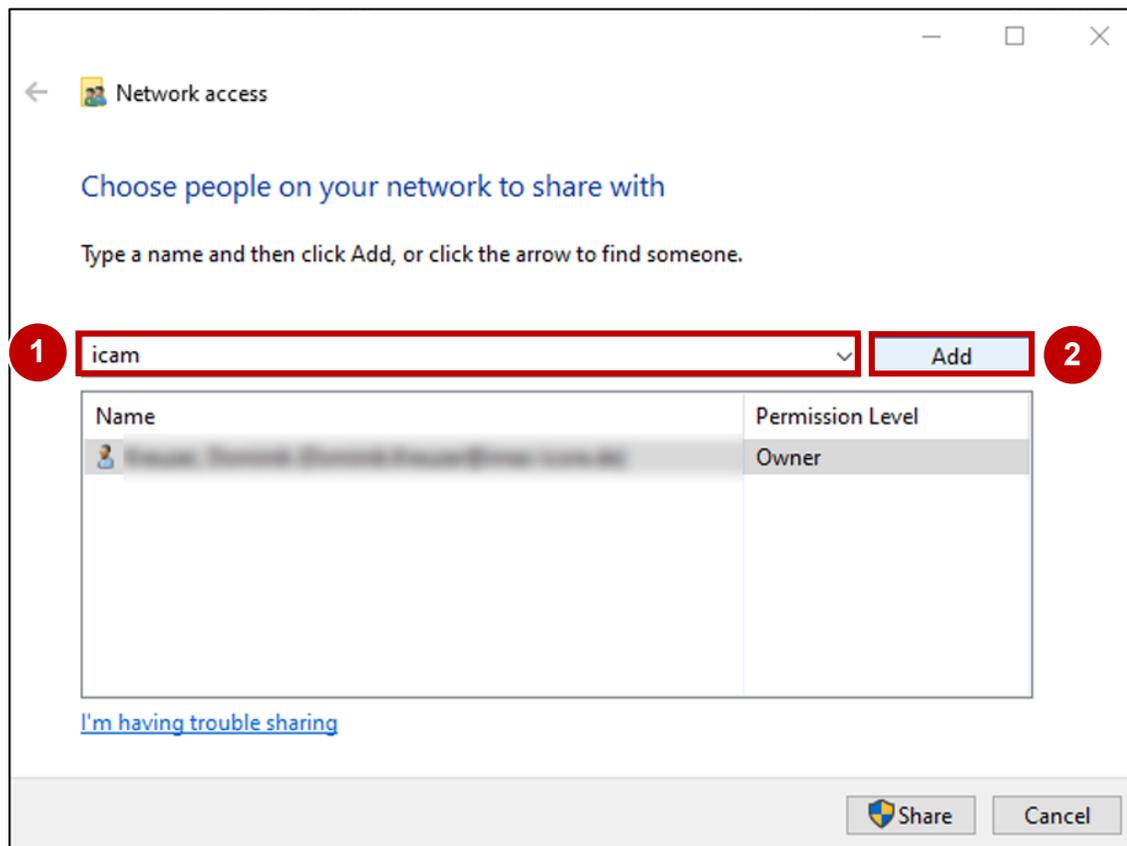

1. Type **icam** into the drop-down field (1).
2. Press Add (2).

1. Im Drop-Down-Feld (1) **icam** eintippen.
2. Hinzufügen (2) betätigen.


3.

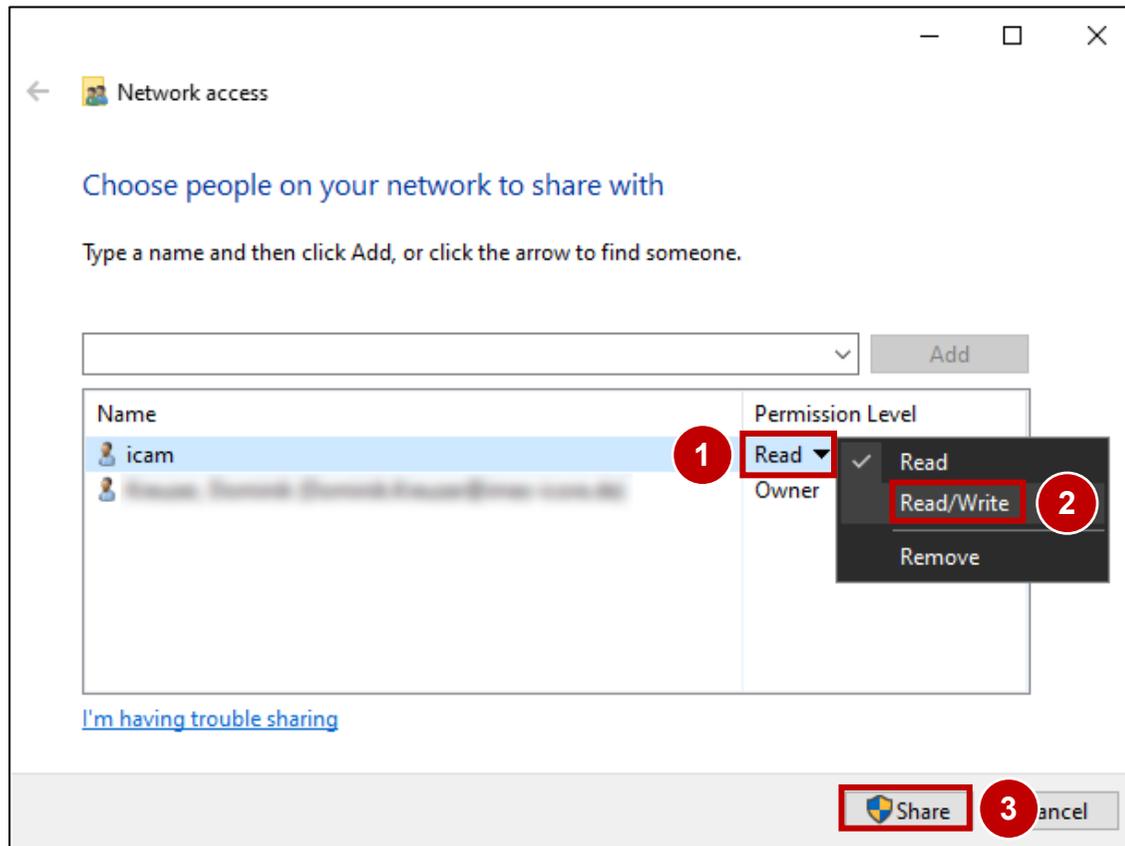

1. Press onto the Permission Level (1) of the User icam.
2. Choose Read/Write (2).
3. Press Share (3).

-
1. Betätigen der Berechtigungsebene (1) des Benutzers icam.
 2. Lesen/Schreiben (2) auswählen.
 3. Freigabe (3) betätigen.

4.

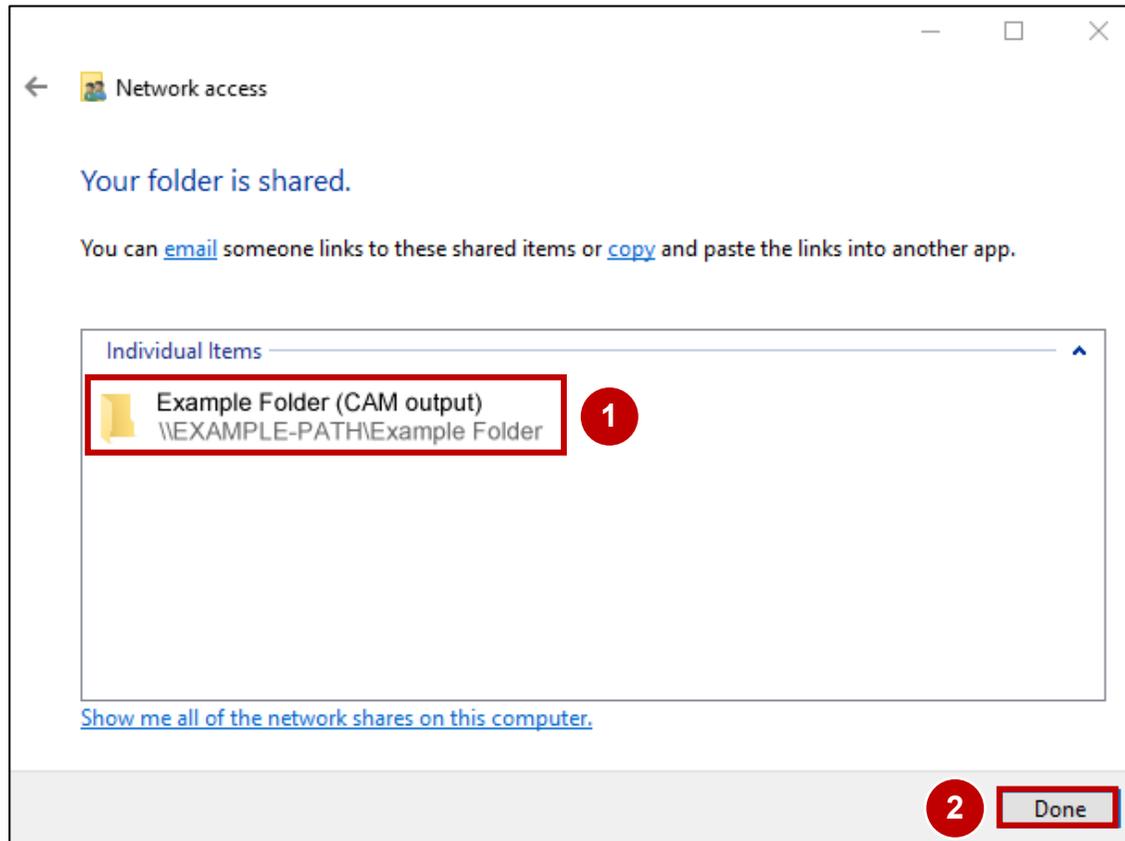


1. Check the correctness of the shared folder (1).
2. Press Done (2).
3. The network set-up of the CAM PC is accomplished!

1. Prüfen des freigegebenen Ordners (1) auf Richtigkeit.
2. Fertig (2) betätigen.
3. Die Netzwerkeinrichtung des CAM PCs ist abgeschlossen!

Network set-up CORiTEC system | Netzwerkeinrichtung CORiTEC System

CORiTEC system with SmartControl V2.0 | CORiTEC System mit SmartControl V2.0


1.

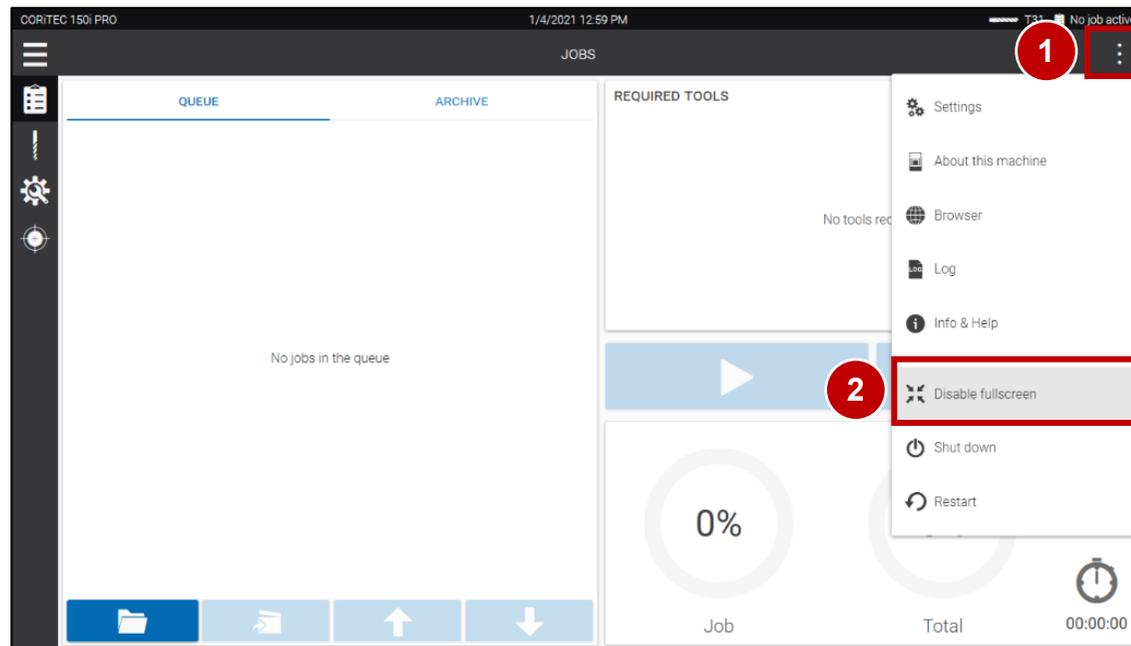

1. Switch on the machine at the main switch.
2. Wait until the Customer UI has completely booted.
3. Press the menu button (1).
4. Press Disable fullscreen (2).

1. Maschine am Hauptschalter einschalten.
2. Warten bis Kunden UI vollständig gebootet hat.
3. Menü-Taste (1) betätigen.
4. Vollbild deaktivieren (2) betätigen.


2.

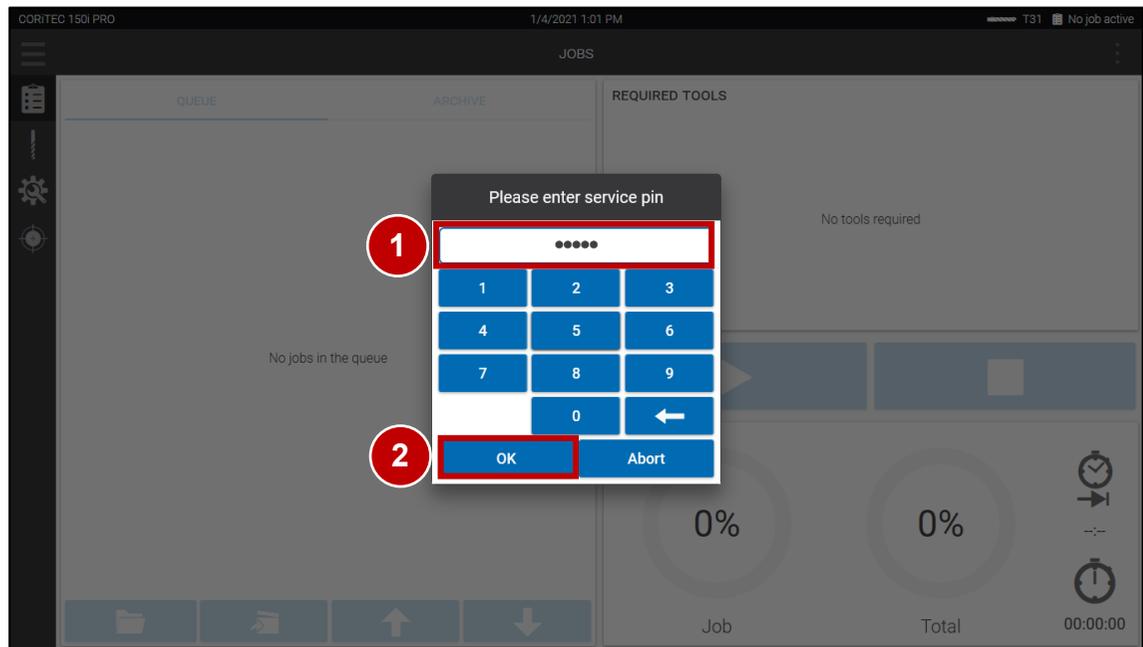

1. Enter Password (1).
(Note: To receive Password contact imes-icore customer service!)
2. Press OK (2).

-
1. Passwort eingeben (1).
(Hinweis: imes-icore Kundenservice kontaktieren, um das Passwort zu erhalten!)
 2. OK betätigen (2).


3.

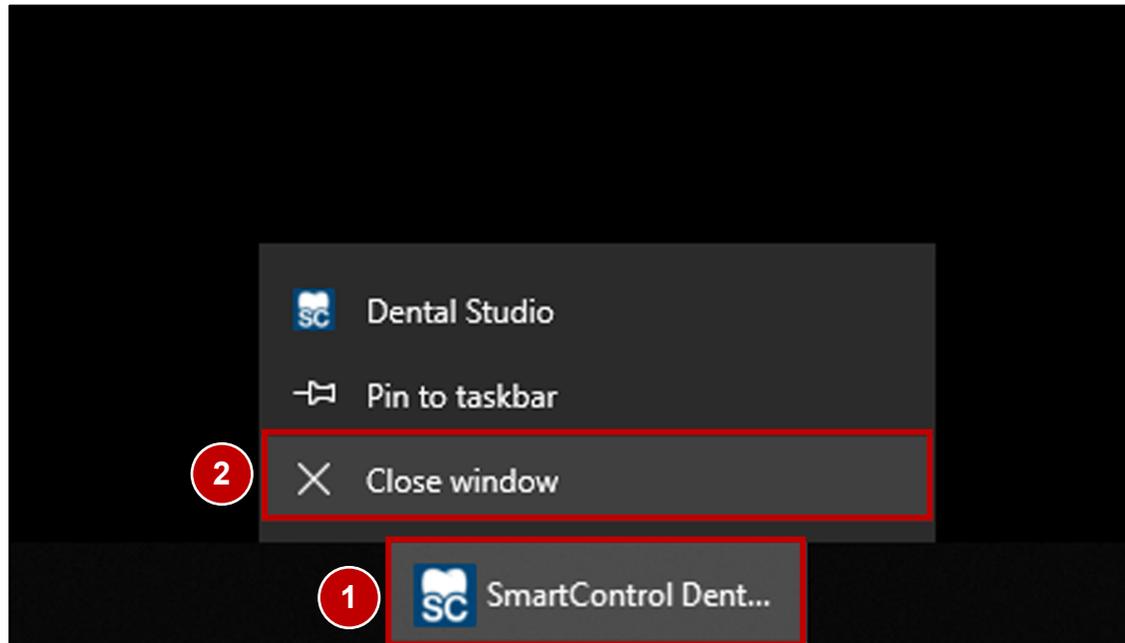

1. Press on and hold on the minimized SmartControl task (1) in the Taskbar to open the context menu.
2. Press Close window (2) to quit the Customer UI.

-
1. SmartControl Anwendung (1) betätigen und gedrückt halten, um das Kontextmenü zu öffnen.
 2. Fenster schließen (2) betätigen, um die Kunden UI zu beenden.


4.

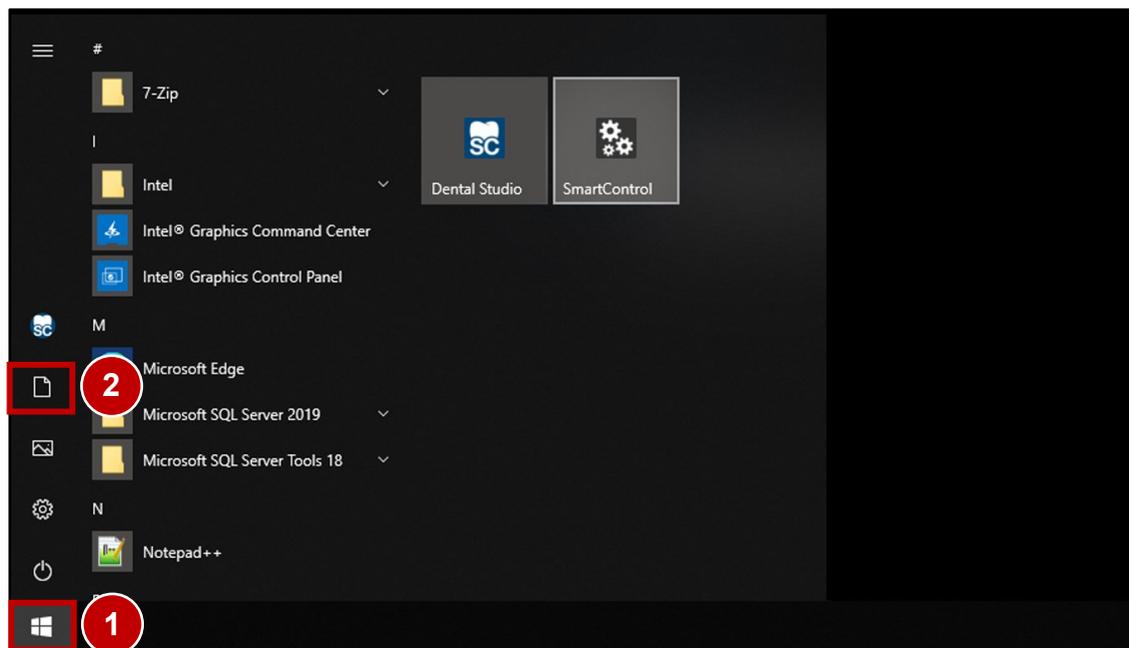

1. Press the Windows® Start button (1).
2. Press the Documents button (2) to open a Windows® Explorer window.

-
1. Windows®-Start-Taste (1) betätigen.
 2. Schaltfläche Dokumente (2) betätigen, um ein Windows®-Explorer-Fenster zu öffnen.


5.

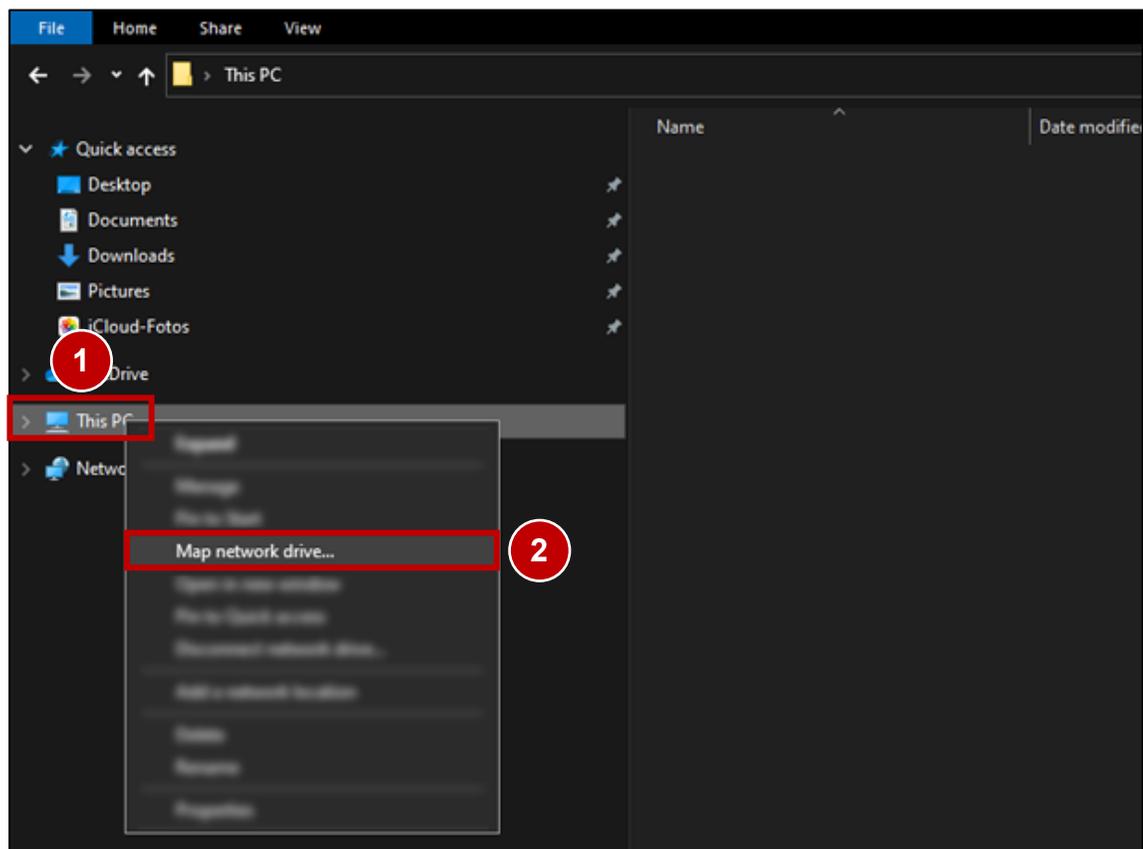

1. Right-click on the This PC tab (1) to open the context menu.
2. Press Map network drive... (2).

-
1. Rechtsklick auf den Reiter Dieser PC (1), um das Kontextmenü zu öffnen.
 2. Netzlaufwerk verbinden... (2) betätigen.

6.

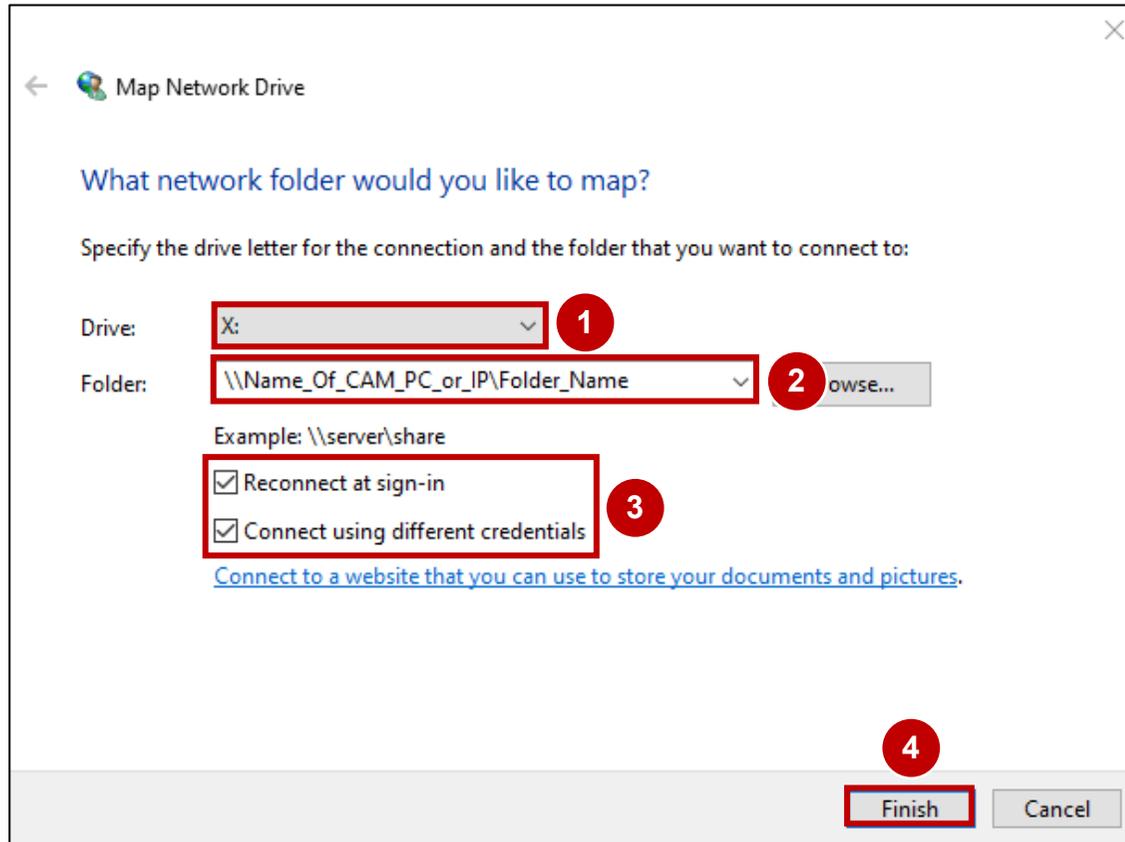

1. Choose a Drive (1).
(For example X; Y; Z).
2. Type in the field Folder (2) the shared folder of the CAM PC.
3. Set both check marks (3).
4. Press Finish (4).

-
1. Ein Laufwerk (1) auswählen.
(Beispielsweise X; Y; Z)
 2. Im Feld Ordner (2) den freigegebenen Ordner des CAM PCs eintragen.
 3. Beide Haken setzen (3).
 4. Fertig stellen (4) betätigen.


7.

The image shows a Windows Security dialog box titled "Enter network credentials". The dialog prompts the user to enter credentials to connect to a device named "Name_Of_CAM_PC_or_IP". It features four input fields, each highlighted with a red box and a red circle containing a number: 1. Username, 2. Password, 3. "Remember my credentials" checkbox, and 4. "More choices" link. At the bottom, there are "OK" and "Cancel" buttons, with the "OK" button also highlighted with a red box.

1. Type in **icam** as Username (1).
2. Type in **imeS200-** as Password (2).
3. Set check mark (3).
4. Press OK (4).

-
1. **icam** als Benutzername (1) eingeben.
 2. **imeS200-** als Kennwort (2) eingeben.
 3. Haken setzen (3).
 4. Ja (4) betätigen.


8.

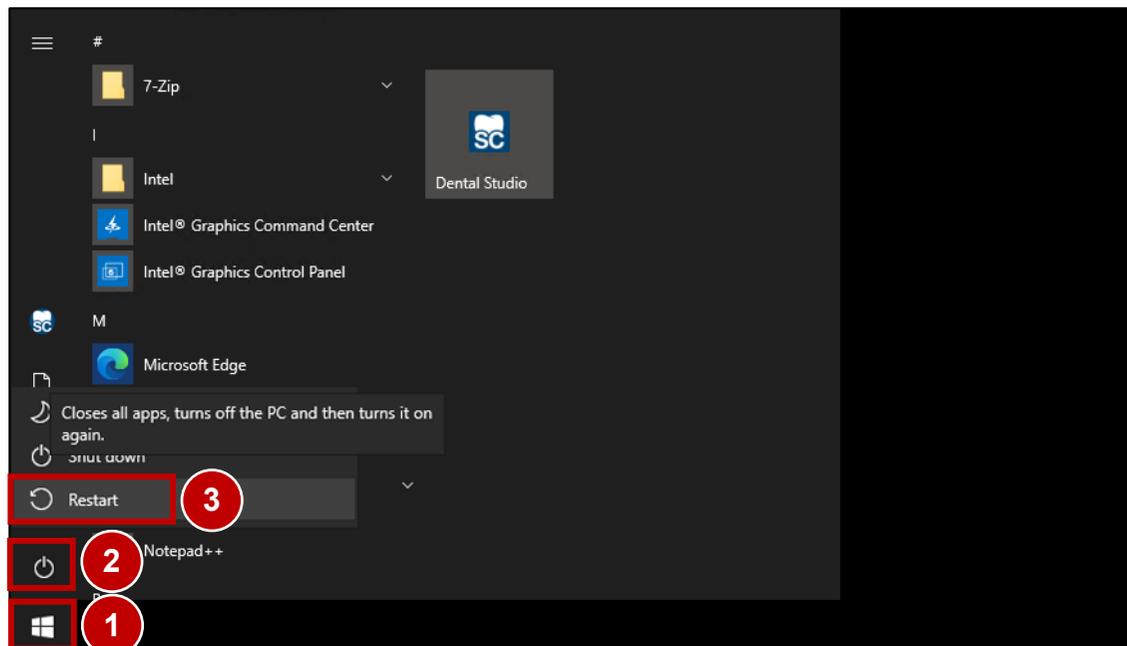

1. Press the Windows® Start button (1).
2. Press the Power button (2).
3. Press the Restart button (3).

-
1. Windows®-Start-Taste (1) betätigen.
 2. Schaltfläche Ein/Aus (2) betätigen.
 3. Schaltfläche Neustarten (3) betätigen.


9.

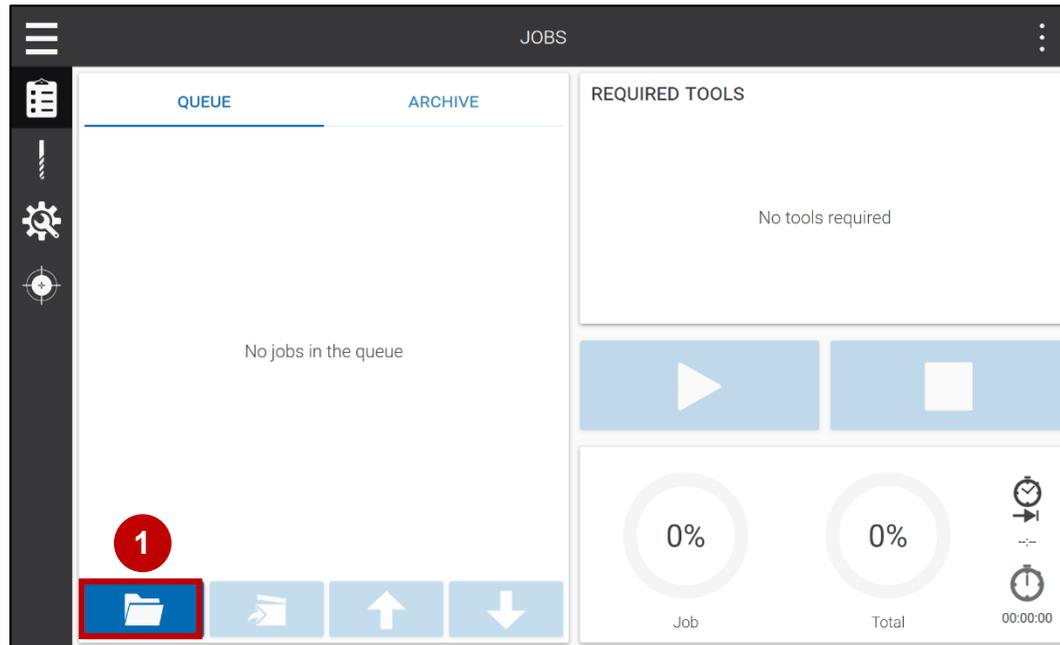

1. Press the Load milling file (1) button.

1. Fräsdatei laden (1) Schaltfläche betätigen

10.

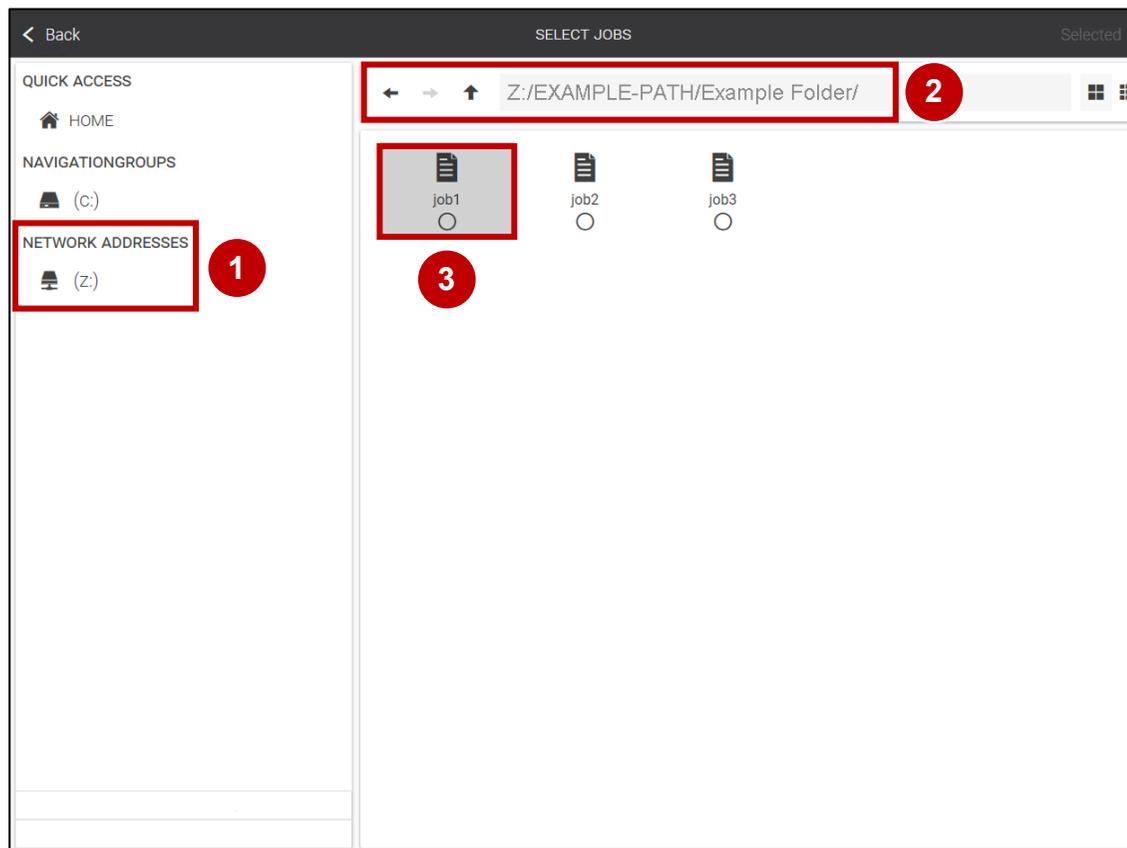


1. Press the Network addresses tab (1).
2. Open the shared folder (2) of the CAM PC.
3. Select the corresponding milling file (3).
4. Network set-up accomplished!

-
1. Netzwerkadressen Reiter (1) betätigen.
 2. Freigegebenen Ordner (2) des CAM PCs öffnen
 3. Entsprechende Fräsdatei (3) auswählen.
 4. Netzwerkeinrichtung abgeschlossen!

CORiTEC system with SmartControl V1.0 or REMOTE | CORiTEC System mit SmartControl V1.0 oder REMOTE

1.

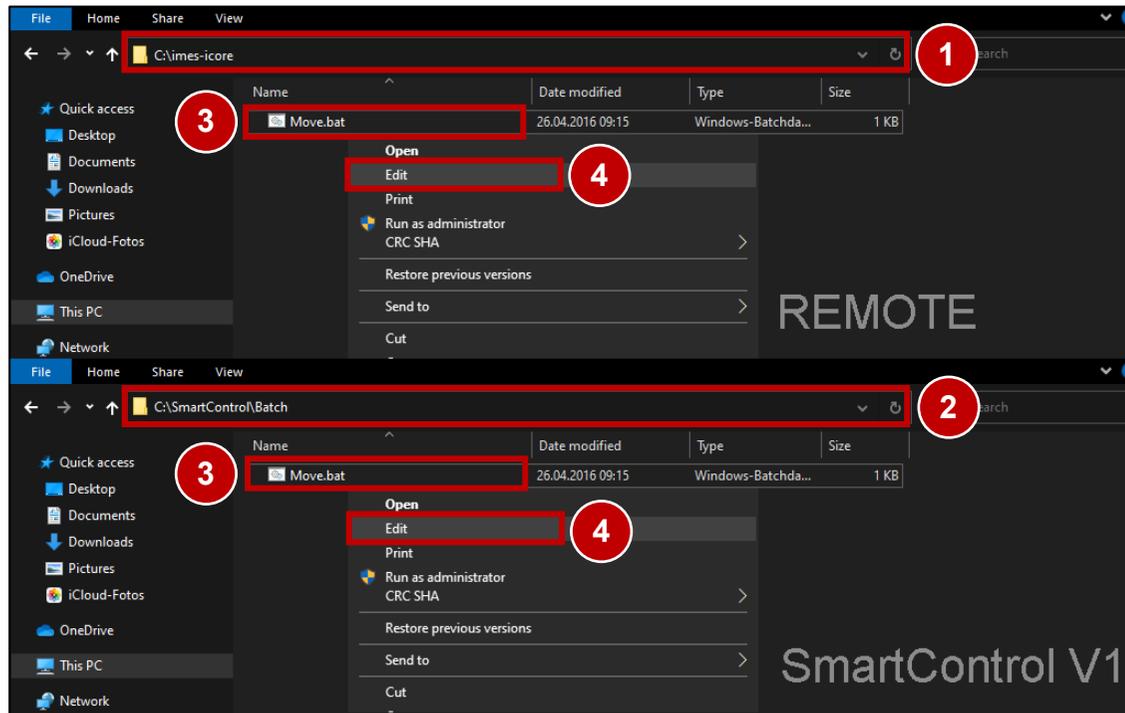

1. Switch on the Machine at the main switch.
2. Wait until the Machine has completely booted.
3. Do not start REMOTE or SmartControl V1 otherwise close the Software!
4. Open Windows® Explorer.
5. Navigate to Folder:
(1) For Machine with REMOTE
C:\imes-icore\
(2) For Machine with SmartControl V1
C:\SmartControl\Batch\
6. Right-click the file Move.bat (3) to open the context menu.
7. Press Edit (4).

1. Maschine am Hauptschalter einschalten.
2. Warten bis die Maschine vollständig gebootet hat.
3. REMOTE oder SmartControl V1 nicht starten, andernfalls Software schließen!
4. Windows®-Explorer-Fenster öffnen.
5. Navigieren zum Ordner:
(1) Für Maschinen mit REMOTE
C:\imes-icore\
(2) Für Maschinen mit SmartControl V1
C:\SmartControl\Batch\
6. Rechtsklick auf die Datei Move.bat (3), um das Kontextmenü zu öffnen.
7. Bearbeiten (4) betätigen.

2.

```

Move.bat - Editor
File Edit Format View Help
@echo off
NET USE X: "\\EXAMPLE-PATH\\Example Folder" imeS200- /USER:icam /PERSISTENT:YES /YES
Move /Y X:*.iso "C:\\NC_Daten\\XXXi"
NET USE X: /DELETE /YES
    
```

1. Copy and paste the text from the picture into the Move.bat or insert it manually.
2. Replace the red marked text **EXAMPLE-PATH\\Example Folder** with the correct shared CAM PC output path!
3. Replace the red marked text **NC_Daten\\XXXi** with the correct Machine path!
Note: Observe correct writing!
4. Press File.
5. Press Save.
6. Close the Editor.
7. Network set-up accomplished!

-
1. Text vom Bild kopieren und in die Move.bat einfügen oder händisch eintragen.
 2. Den rot markierten Text **EXAMPLE-PATH\\Example Folder** durch den korrekten freigegebenen CAM PC-Ausgabepfad ersetzen!
 3. Den rot markierten Text **NC_Daten\\XXXi** durch den korrekten Maschinenpfad ersetzen!
Hinweis: Korrekte Schreibweise beachten!
 4. Datei betätigen.
 5. Speichern betätigen.
 6. Beenden betätigen.
 7. Netzwerkeinrichtung abgeschlossen!



imes-icore GmbH

Im Leibolzgraben 16
D-36132 Eiterfeld



+49 (0) 6672 898-469



+49 (0) 6672 898-223



support@imes-icore.de



www.imes-icore.de